


Compatibilité


Large
Bouche
VersionDémonter les pièces
avant la stérilisation

Compatibilité des bouteilles

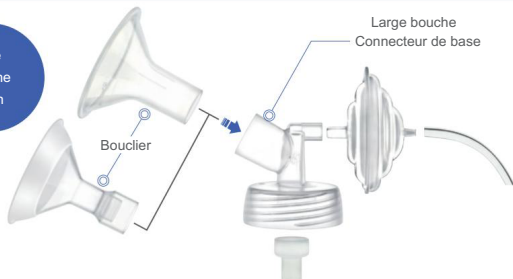

Avent Classic Avent Natural Spectra

Maman de mai

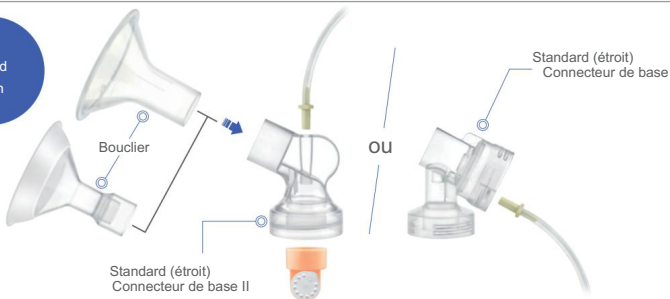Standard
Version

Compatibilité des bouteilles



Usine de vie Ameda

Medela

Maymom du Dr Brown

maymom bottle
ASIN: B07JFG6K68

Pompe compatible



Certificats

- Enregistré auprès de la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe II, kit tire-lait.
Numéro d'enregistrement D192499.
- Conforme aux exigences de la FDA pour les conteneurs en contact avec les aliments
(21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- Sans BPA (EN 14350-2:2004 Clause 4.8.)

Dépannage (pour brides de la série Pano/Comfy)

Si vous constatez que le bord souple est déformé, ne vous inquiétez pas. Cela est probablement dû à une compression prolongée pendant le transport. Plongez simplement la pièce complètement dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes, puis laissez-la refroidir avec le bord souple entièrement tourné vers le bas sur une surface plane. Elle devrait reprendre sa forme normale.

Nettoyage

Avant le nettoyage, détachez le blindage du connecteur de base.

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincez.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.

Après chaque utilisation :

- Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède. Sécher complètement à l'air libre.



Le bord de la casserole sans eau surchauffera et cela fera fondre le plastique.

Service client

CS@maymom.com
<http://maymom.com/>
+1 919 4535168
Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Modèle M012-(t)B / S012W-B / MP012 / SP012 / MP012F / MP012FP
Matériel PP / PP+TPE Résistant à la chaleur 110° C (230° F)
Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)
Fabricant Date 6 août 2024

*Ameda est une marque déposée d'Ameda INC. Corp. Maymom n'est pas affiliée à Ameda et Ameda n'approuve pas le produit.
*Avent est une marque déposée de Philips NL. Maymom n'est pas affiliée à Philips et Philips n'approuve pas le produit.
*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela ne fait pas la promotion du produit.
*Spectra est une marque déposée de Uzinmedicare co. Maymom n'est pas affiliée à Uzinmedicare et Spectra n'approuve pas le produit.






Installation

Poussez doucement et symétriquement la valve sur la tétérelle. **NE** la poussez PAS trop fort car cela rendrait le retrait très difficile. Cependant, si elle n'est pas suffisamment serrée, il peut y avoir une fuite d'air. Une perte de puissance d'aspiration se produira.



Correct
Installation

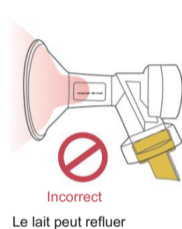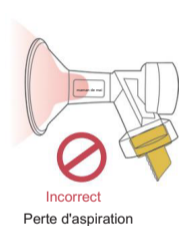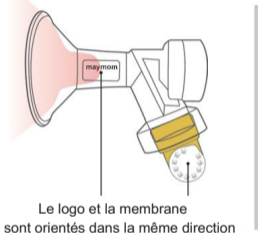


Suppression

Retirez d'abord la membrane de la valve (voir CONSEIL ci-dessous) puis :

(A) Tenez fermement la tétérelle avec l'une de vos paumes


(B) Faites basculer la valve vers la gauche et vers la droite jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est desserrée.

(C) Tournez la valve et retirez-la.

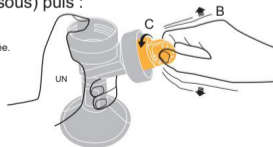

CONSEIL : Retirer la membrane en la poussant vers l'extérieur de la valve plutôt qu'en la tirant vers l'extérieur peut prolonger sa durée de vie.

Orientation correcte de la membrane de contrôle

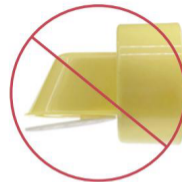

Orientation incorrecte pour la vérification.
Personne ne pompe à cette position (étendu).

Entretien des membranes et des valves



NE LAISSEZ PAS le lait maternel sécher entre la valve et la tétérelle.
Le lait en poudre peut agir comme de la colle !



Laver la membrane à la main avec précaution. **NE PAS** tirer ni étirer.



Ce produit est sujet à l'usure. Pour des performances optimales, vous devez le remplacer par un neuf lorsque vous détectez une membrane usée et déchirée.



Service client :

CS@maymom.com



Date de production :
7 JUILLET 2024


Guide de sélection des tailles de tétérelles

Tirer son lait ne devrait pas être douloureux ni inconfortable si vous avez la bonne taille de tétérelle ET le bon réglage de puissance du moteur. Ces instructions vous montrent comment choisir la bonne taille de tétérelle. Pour ce qui est de la puissance d'aspiration, veuillez vous référer au manuel de votre tire-lait.

- 1 Mesurez le diamètre de votre mamelon (N) APRÈS une séance de pompage.


Vous pouvez visiter www.maymom.com/nippleruler pour obtenir une règle à tétons gratuite.

- 2 Nous vous suggérons de commencer par essayer une taille de bouclier respiratoire (B) de 1 à 2 mm plus grand que le diamètre de votre mamelon. Si vous mesurez le diamètre de votre mamelon AVANT une séance de pompage, nous pouvons seulement estimer que la taille de la tétérelle doit être de 2 à 5 mm plus grande que le diamètre de votre mamelon.

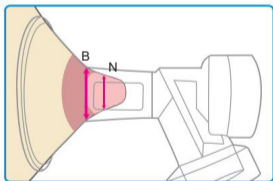

AJUSTEMENT CORRECT


Le mamelon bouge facilement sans aucune douleur.

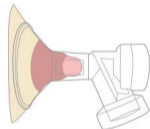

Tétérelle est trop grand

Le mamelon et l'aréole excédentaire sont tirés dans le tunnel.


Essayez une taille plus petite.

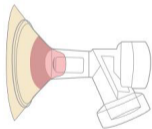

Tétérelle est trop petit


Le mamelon frotte le long du côté du tunnel et provoque une gêne.

Essayez une taille plus grande.

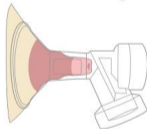

Tétérelle est trop court

Le mamelon touche l'extrémité du tunnel. Essayez une taille plus longue ou plus petite.

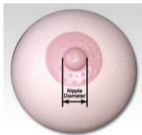

- 3 Centrez le mamelon dans le tunnel de la tétérelle.

Commencez maintenant à pomper et vérifiez les points suivants :

OUI	NON	Question ?
		Votre mamelon bouge-t-il librement dans le tunnel ?
		Est-ce qu'aucun tissu de l'aréole ou seulement une très petite quantité est aspiré dans le tunnel de la tétérelle ?
		Reconnaissez-vous des mouvements doux et rythmés dans le sein à chaque cycle de tirage ?
		Sentez-vous que le sein se vide partout ?
		Votre mamelon ne ressent-il plus de douleur ?
		Y a-t-il encore de l'espace entre la pointe de votre mamelon et l'extrémité du tunnel du mamelon pendant le pompage ?

Toutes les réponses doivent être **OUI**, ce qui indique que vous avez la bonne taille de tétérelle et la bonne puissance d'aspiration du moteur. Si ce n'est pas le cas, veuillez consulter votre consultante en lactation ou cesser d'utiliser les produits Maymom pour éviter tout inconfort supplémentaire.