


Kit de brida MyFit^{MT.}

Serie de cráteres


Mejor ajuste para senos con forma de cuenco

No todas las madres tienen la misma forma de pecho. Los protectores de la serie Crater de Maymom están diseñados para un mejor ajuste con pechos en forma de cuenco, especialmente cuando están llenos. Un mejor ajuste significa menos espacio vacío entre la areola y el protector, lo que ofrece una extracción más cómoda y eficiente.

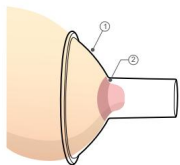

Cráter MyFit


- 1 Ajuste cómodo sin puntos de presión ni dolores.
- 2 Bombeo eficiente debido a un mejor sellado y menos espacio vacío.

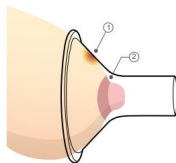

Otro escudo

- 1 Dolores por presión y opresión en el pecho.
- 2 Ineficiencia debido a más espacio vacío.

Compatibilidad

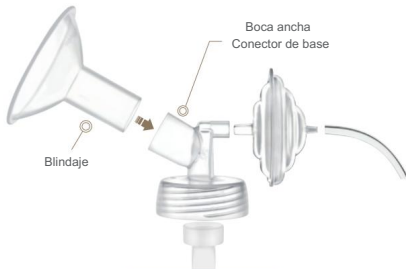

Compatibilidad de botellas



Avent

Avent

espectro maymom

Sujetador de extracción compatible

Al ser un protector separable, este producto es compatible con casi todos los sujetadores de extracción del mercado.



Deseos simples



medela



BRAVATA



Bomba y enfermera



Pacasso



Correa de bomba

Bomba compatible



Sinergia de oro



Sinergia de oro



S1



S2



9+

Medela



ajuste personal



Doblar



Sonsta



Armonía



Culpicio maxi

Otros



Lansinoh



Lansinoh
Manual



Mamá maya
Estándar




Mamá maya
Boca ancha



Mamá maya
Estándar

Certificados

- Registrado en la FDA de EE. UU. como dispositivo médico de clase II, kit para extractor de leche. N.º de registro: D192499.
 - Cumplir con el requisito de la FDA para los contenedores que entran en contacto con alimentos 
- (Título 21 del Código de Reglamentación Federal, artículo 177.1520, artículo 21 del Código de Reglamentación Federal, artículo 177.3620)
- Libre de BPA (EN 14350-2:2004 Cláusula 4.8.)

Limpieza

Antes de limpiar, separe el protector del conector de la base.

Antes del primer uso y una vez al día:

- Desmontar todas las piezas, limpiarlas con agua caliente y jabón y enjuagar.
- Hervir las piezas en agua hirviendo durante 3 minutos.

Después de cada uso:

- Desmontar, limpiar y enjuagar las piezas con agua tibia.
- Dejar secar al aire completamente.

Apto para lavavajillas SOLAMENTE en el estante superior.



Desmontar piezas
antes de la esterilización

Servicio al cliente

✉ CS@maymom.com
🏠 <http://maymom.com/>
☎ +1 919 4535168
📍 Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, Carolina del Norte 27703

Información del producto

Modelo **MP012C, S012W.BC-F**Dx2**
Material Polipropileno
A prueba de calor 110 ° C (230 ° F)
Duración 5 años (lejos de la luz solar directa)
Fecha de fabricación: 1 de agosto de 2024

