


# Kit de bride MyFit<sup>MT</sup>

## Série Cratère


### Meilleur ajustement pour les seins en forme de bol

Toutes les mères n'ont pas la même forme de poitrine. Les protège-mammaires de la série Crater de Maymom sont conçus pour s'adapter parfaitement aux seins en forme de bol, en particulier lorsqu'ils sont pleins. Un meilleur ajustement signifie moins d'espace vide entre l'aréole et le protège-mammaires, offrant ainsi un pompage plus confortable et plus efficace.

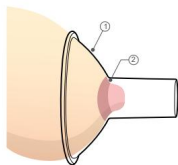

#### Cratère MyFit


- 1 Ajustement confortable sans point de pression ni douleur
- 2 Pompage efficace grâce à une meilleure étanchéité et moins de vide espace

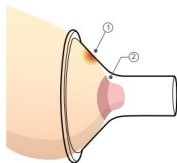

#### Autre bouclier

- 1 Douleurs dues à la pression et à la compression sur la poitrine
- 2 Inefficacité due à un espace vide plus important

### Compatibilité

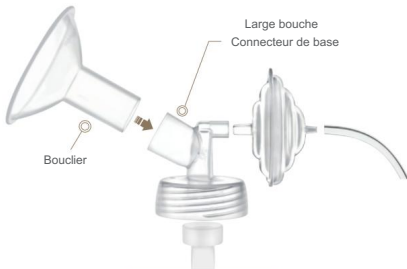

#### Compatibilité des bouteilles



Avent

Avent

Spectra Maymom

### Soutien-gorge d'allaitement compatible

Étant un bouclier séparable, ce produit est compatible avec presque tous les soutiens-gorge d'allaitement du marché



Des vœux simples



médela



BRAVADE



Pompe et infirmière



Pacasso



Sangle de pompe

### Pompe compatible



Synergie d'or



Synergie d'or



S1



S2



9+

## Medela



ajustement personnalisé



Fléchir



Sonsta



Harmonie



Balançoire Maxi

## Autres



Lansinoh



Lansinoh  
Manuel



Maman de mai  
Standard




Maman de mai  
Large bouche



Maman de mai  
Standard

## Certificats

- Kit tire-lait enregistré auprès de la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe II. N° d'enregistrement D192499.
- Conforme aux exigences de la FDA pour les conteneurs en contact avec les aliments (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600) 
- Sans BPA (EN 14350-2:2004 Clause 4.8.)

## Nettoyage

Avant le nettoyage, détachez le blindage du connecteur de base.

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincez.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.

Après chaque utilisation :

- Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède.
- Sécher complètement à l'air.

Lavable au lave-vaisselle UNIQUEMENT sur le panier supérieur.



Démontez les pièces  
avant la stérilisation

## Service client

- ✉ CS@maymom.com
- 🏠 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom SARL  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

## Informations sur le produit

Modèle **MP012C, S012W.BC-F\*\*Dx2**  
Matériel Polypropylène  
Résistant à la chaleur 110° C (230° F)  
Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)  
Fabricant Date 1 août 2024

