


## Crater-serien


### Bättre passform för skålförmade bröst

Alla mammor har inte samma bröstform. Maymom Crater Series Shields är skapade för en bättre passform med skålförmade bröst, speciellt när de är fulla. En bättre passform innebär mindre utrymme mellan värtgården och skölden, vilket ger en bekvämare och effektivare pumpning.

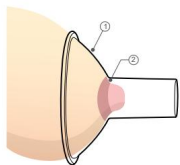

#### MyFit Crater


- 1 Bekväm passform utan tryckpunkter och smärtor
- 2 Effektiv pumpning tack vare bättre tätning och mindre tomrumsutrymme

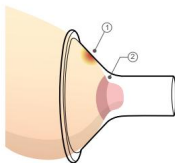

#### Annan sköld

- 1 Smärtor på grund av tryck och klämningar på bröstet
- 2 Ineffektivitet på grund av mer tomrumsutrymme

### Kompatibilitet

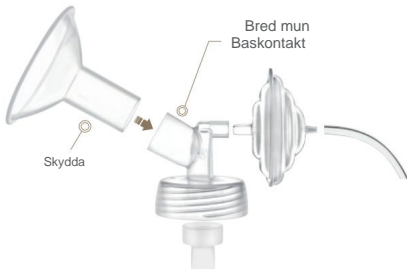

#### Flaskkompatibilitet



Avent

Avent

SpeCtra Maymom

### Kompatibel Pumping BH

Eftersom denna produkt är en separerbar sköld är den kompatibel med nästan alla pumpande behåer på marknaden



Enkla önskemål



medela



ÖVERMOD



Pump&amp;Sköterska



Pacasso



Pumprem

### Kompatibel pump



Synergy guld



Synergy guld



S1



S2



9+

## Medela



personlig passform



Böja



Sonsta



Harmoni



Swing Maxi

## Andra



Lansinoh



Lansinoh  
Manuell



Mamma  
Standard




Mamma  
Bred mun



Mamma  
Standard

## Certifikat

- Registrerad hos US FDA som klass II medicinsk utrustning, bröstpumpssats. Reg. nr D192499.
- Följ FDA-kraven för behållare som kommer i kontakt med livsmedel   
(21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)
- BPA-fri (EN 14350-2:2004 klausul 4.8.)

## Rengöring

**Före rengöring, lossa skärmen från baskontakten.**

**Före första användningen och en gång dagligen:**

- Ta isär alla delar, rengör med varmt tvålatten och skölj rent.
- Koka delarna i kokande vatten i 3 minuter.

**Efter varje användning:**

- Demontera, rengör och skölj delarna i varmt vatten.  
Lufttorka helt.

**Tål maskindisk ENDAST på översta hyllan.**



**Demontera delar  
före sterilisering**

## Kundservice

✉ CS@maymom.com  
🏠 <http://maymom.com/>  
☎ +1 919 4535168  
📍 Maymom LLC  
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

## Produktinformation

**Modell** MP012C, S012W.BC-F\*\*Dx2  
**Material** Polypropen  
**Värmebeständig** 110o C (230o F)  
**Hållbarhet** 5 år (Från direkt solljus)  
**Mfr. Datum** 1 augusti 2024

