


MyFit Flanş Takımı

Krater Serisi


Kase Şeklindeki Göğüsler İçin Daha Uygun

Her annenin göğüs şekli aynı değildir. Maymom Krater Serisi Kalkanlar, özellikle dolgun olduklarında, kase şeklindeki göğüslere daha iyi uyum sağlamak için yaratılmıştır. Daha iyi uyum, areola ile kalkan arasında daha az boşluk olması anlamına gelir ve böylece daha rahat ve etkili pompalama sağlar.

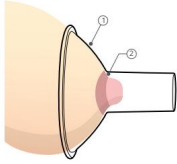

MyFit Krateri

- ① Basınç noktası ve ağrı olmadan rahat uyum
- ② Daha iyi sızdırmazlık ve daha az boşluk sayesinde verimli pompalama uzay

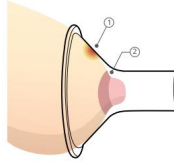

Diğer Kalkan

- ① Göğüste baskı ve sıkışmaya bağlı ağrılar
- ② Daha fazla boşluk nedeniyle verimsizlik

Uyumluluk



Uyumlu Pompalı Sütyen

Ayrılabilir bir kalkan olan bu ürün, piyasadaki hemen hemen tüm pompalı sütyenlerle uyumludur.



Basit Dilekler



medela



CESURLUK



Pompa&Hemşire



Pacasso



Pompa Kayışı

Uyumlu Pompa



Sinerji Altın



Sinerji Altın



S1



S2



9+

Medela



Kişisel uyum



Esneklik



Sonsta



Uyum



Salıncak Maxi

Diğerleri



Lansinoh



Lansinoh
Manuel



Maymom
Standart



Maymom
Geniş ağız



Maymom
Standart

Sertifikalar

- ABD FDA'ya sınıf II tıbbi cihaz, göğüs pompası kiti olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.
- Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)
- BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)



Temizlik

Temizlemeden önce kalkanı taban konnektöründen ayırın.

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları söküp sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

Her kullanımdan sonra:

- Parçaları söküp temizleyin ve ılık suda durulayın.
- Tamamen hava ile kurutun.

Bulaşık makinesinde YALNIZCA üst rafta yıkanabilir.



Parçaları söküp
sterilizasyondan önce

Müşteri Hizmetleri

✉ CS@maymom.com
🌐 http://maymom.com/
☎ +1 919 453168
📍 Maymom LLC
3 Defne Yapağı CT, Durham, NC 27703

Ürün Bilgileri

Örnek MP012C, S012W.BC-F**Dx2
Malzeme Polipropilen
Isıya dayanıklı 110o C (230o F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 1 Ağustos 2024

