

Slangen voor speCtra

ÿPast op speCtra S1/S2 pompen

ÿ100% compatibiliteit

ÿBPA- en DEHP-vrij

ÿ42 inch lang

Materiaal	Siliconen
Hittebestendig	-10 - 120°C (15-250°F)
Houdbaarheid	10 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)
Modelnr.	S001.55-105SII



Gebruiksaanwijzing

Schoon

De slang is niet steriel, maar wel schoon. U kunt hem gebruiken zoals hij is. Melk komt niet in contact met de slang.

Sterilisatie is niet nodig. Als de slang vies wordt, gebruik dan een vochtige handdoek om het stof eraf te vegen.

Gebruik

- (A) Sluit het ene uiteinde van de slang aan op de pomp en het andere uiteinde op het kleine uiteinde van de terugslagklep.
- (B) Als het uiteinde van de slang losraakt na een periode van gebruik, snijd dan ongeveer 1/8 inch van het uiteinde af. Het zal weer als nieuw zijn.

Probleemoplossing

Lage zuigkracht –

Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot een lage zuigkracht.

Controleer of

- ÿde eendenbek (of het kleine witte membraan) moet worden vervangen;
- ÿde gele klep (indien u de Medela of Maymom flens gebruikt) is geïnstalleerd volgens de bijbehorende instructies;
- ÿer een scheur in het hele systeem zit;
- ÿhet witte membraan van de terugslagklep beweegt vrij heen en weer;
- ÿer schade is aan de slangen (huisdieren kauwen graag op de slangen);
- ÿHet uiteinde van de slang zit los.

Zorg

ÿDe slang is geen speelgoed. Houd de slang uit de buurt van kinderen en huisdieren.

ÿLaat het product niet voor langere tijd in de auto liggen.

Extreme weersomstandigheden kunnen de slangen beschadigen.

ÿGebruik geen UV-straling of stoom om de onderdelen te steriliseren.

(A)



Niet gebruiken Niet gebruiken UV
stoomzak



Voorkom
dat huisdieren kauwen



WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR
Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Maymom Klantenservice

CS@maymom.com
+1 919 4535168

http://maymom.com/

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

*SPECTRA en het SPECTRA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA en Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom is niet aan hen gelieerd en onderschrijft ook niet de producten en compatibiliteitsclaims van Maymom.

Bedankt dat u voor de Maymom® Breast Pump Kit Set voor speCtra Pump hebt gekozen. Maymom is uw hoogwaardige en veilige, maar toch betaalbare oplossing voor uw behoefte aan borstkolfaccessoires.

Certificaten



yGeregistreerd bij de Amerikaanse FDA als medisch hulpmiddel klasse II, borstkolffset. Registratienummer D192499.


yVoldoet aan de FDA-vereisten voor containers die in contact komen met voedsel (21 CFR 177.1520, 21 CFR 177.2600)

yBPA-vrij (EN 14350-2:2004 clausule 4.8.)

Inhoud van de kit


- ① Brede mondflens (borstschild)
- ② Terugslagklep
 - ②a Binnenbehuizing
 - ②b Siliconen membraan
 - ②c Buitenbehuizing
- ③ Slangen
- ④ Eendenbekventiel

Compatibele onderdelen
Maar is mogelijk niet inbegrepen in deze kit

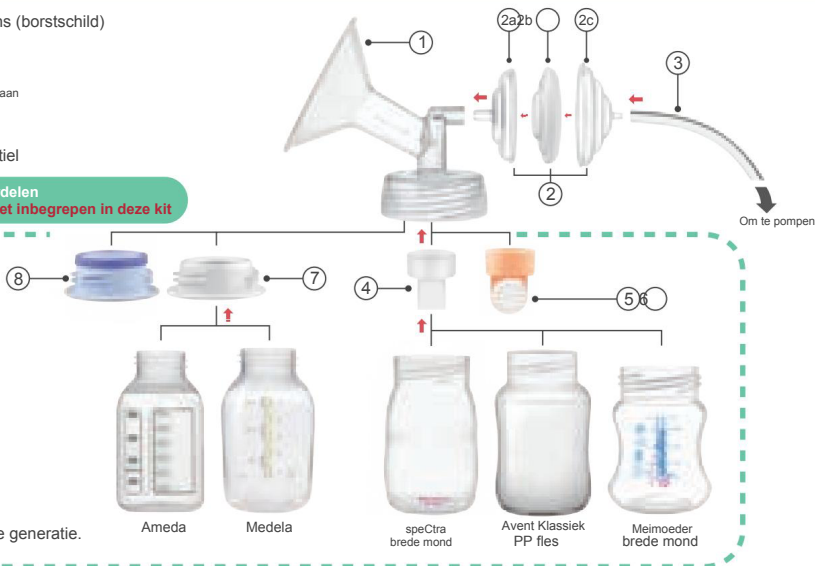


Montage van de backow-protector

- A. Plaats het siliconenmembraan in de binnenbehuizing. Zorg ervoor dat het goed om de rand past.
- B. Plaats de buitenbehuizing op het membraan.
- C. Druk de rand van het siliconenmembraan aan zodat deze gelijk ligt met zowel een buiten- als binnenbehuizing.

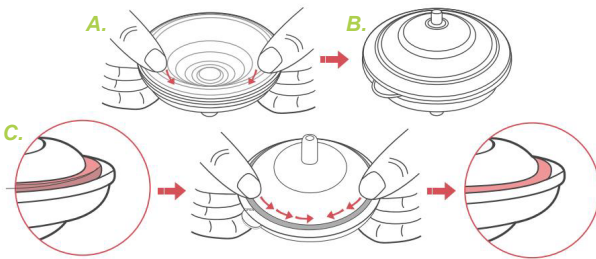

Demontage van de Backow Protector

- A. Houd de binnenbehuizing met één hand vast.
- B. Trek aan de open knoop op de buitenbehuizing om de twee delen te scheiden.

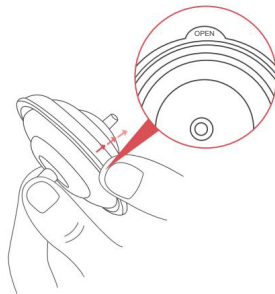

Installatie en verwijdering van Backow Protector

Montage: Draai en plaats de terugslagklep totdat de verbinding goed vastzit.


Druk het niet helemaal naar binnen.

Het is normaal dat er een kleine opening tussen de flens en de beschermer zit.


Verwijderen: Draai de terugslagklep iets. De beschermer schuift met de bocht mee naar buiten.



Draai de terugslagklep iets tegen de klok in.

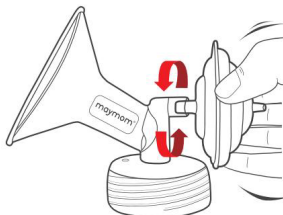



Schud de beschermer **NIE**t hard en probeer hem niet helemaal naar binnen te duwen, want hierdoor kan de steel van de beschermer breken.

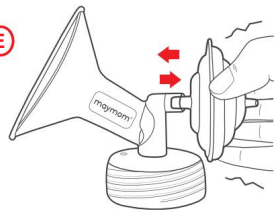

Bijlage

Bevestig de klep **symmetrisch** op de flens (zie foto A).

Als u een grote open opening ziet (zie foto B), kan dit leiden tot verlies van zuigkracht. Druk op de rand van het ventiel totdat de speling kleiner is dan 0,5 mm.

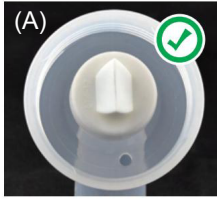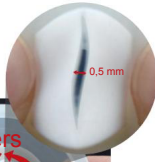**Loslating**


Houd de twee platte kanten van de eendensnavel bij de basis vast en trek opzij.




Trek **NIET** aan de dunne uiteinden

Verwijderen van de slang van de beschermer

Beweeg de slang om deze te verwijderen (Behoud langere levensduur)

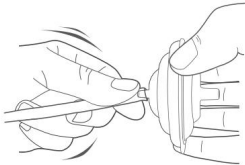

Trek **NIET** aan de slang om deze te verwijderen

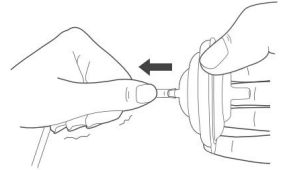**Schoonmaak****Voor het eerste gebruik en eenmaal daags:**

Was de slang **NIET**.

Demonteer alle overige onderdelen, maak ze schoon met zeepsop en spoel ze af met warm water.

Kook de onderdelen 3-4 minuten in kokend water.

Na elk gebruik:

Was de slang **NIET**. Laat aan de lucht drogen. Vervang de slang als deze vuil wordt.

Demonteer, reinig en spoel de onderdelen af met warm water.

Vervang de eendenbek als er een opening is van meer dan 0,5 mm (de dikte van 5 vellen kopieerpapier) bij de rand.

Onjuiste, gebruikelijke reinigings-, opslag- en gebruiksmethoden kunnen het product beschadigen.

Zorg ervoor dat er voldoende water in de pan zit.



De rand van de pan zonder water wordt oververhit en het plastic smelt.

Probleemoplossing

A. De slang zit los bij de aansluiting. Volg de grafiek rechts om een nieuw uiteinde voor de slang te maken.

B. Lage of geen zuigkracht —


Vervang het siliconenmembraan als het niet direct zijn vorm kan herstellen tijdens een pompcyclus.

Vergeet niet om de eendenbek te installeren (veel nieuwe moeders vergeten dit)

Vervang de eendenbek als er een opening groter dan 0,5 mm is bij het lipgedeelte.

Het is echter normaal dat u direct na het kolven een grotere opening ziet.

De opening zou geleidelijk kleiner moeten worden als de eendensnavel niet uitgerekt wordt.

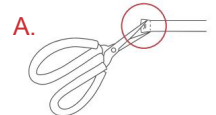

Snijdt 3 mm van het uiteinde van de slang af en de slang is weer als nieuw.

Waarschuwing---Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind

Gebruik het product altijd onder toezicht van een volwassene.

Controleer altijd de temperatuur van het voedsel voordat u het voert.

Het voortdurend en langdurig opzuigen van vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.

Dit product is GEEN speelgoed. Houd alle onderdelen die niet in gebruik zijn buiten bereik van kinderen.

Klantenservice

CS@maymom.com

<http://maymom.com/>

+1 919 4535168

Maymom LLC, 3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703



WAARSCHUWING:

VERSTRIJKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar

Model: S001W.55-2F(D).2sBfp**

*Avent is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips NV.

*Amada is een geregistreerd handelsmerk van Amada INC. Corp.

*Midea is een geregistreerd handelsmerk van Midea Holding AG, Zwitserland.

*SPECTRA en het SPECTRA-Logo zijn geregistreerde handelsmarken van Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA Inc.

Min Byang Wook DBA Linnemedeina

Maymom is niet gelieerd aan deze bedrijven en onderschrijft de product- en compatibiliteitsclaims niet.

Gemaakt in Taiwan

Antislip O-ring

Vanwege variaties in productievorm en -proces, zijn **NIET ALLE** draden van de spectra-flenzen hetzelfde gemaakt. Sommige passingen en vergrendelingen tussen de flens en de bijbehorende onderdelen, bijvoorbeeld flessen, melkzakadapter, zijn niet zo strak als men wenst. Dit kan leiden tot gevallen van vallende melkflessen. Deze antislip o-ring helpt de kans op vallende flessen te verkleinen.

Het gebruik van deze antislip o-ring is echter **NIET** een must. Als je het wilt gebruiken, plaats het dan in de flens (zie de foto) voordat je de bijpassende onderdelen (adapter voor melkbewaarzak, fles) erop schroeft. Dat is alles!



Vragen:

CS@maymom.com

Modelnr.: X032-Fo-513820.b.x2

Gebruik van O-ring

Gebruik deze roze o-ring in plaats van de blauwe TF-ring wanneer u de dop op een OEM speCtra-fles wilt gebruiken om lekkage te voorkomen.



Maymom Fles Avent Fles speCtra Fles

Vragen:

CS@maymom.com

Modelnr.: X132-Fo-534014.m

Eendenbekventiel

Geschikt voor brede/standaard

borstschilden, Medela, Hygeia,
Spectra, Freemie Open System Retired
en maymom borstschilden

Eendenbek-info

- Na het pompen kunnen de uiteinden van het eendenbekventiel lichtjes opengaan.

De opening zal echter geleidelijk sluiten.

Dit is geen defect omdat de klep van elastisch materiaal is gemaakt.

Tijdens het kolven worden de uiteinden opengerekte om de melkstroom mogelijk te maken. Wanneer u stopt met kolven, worden de uiteinden niet uitgerekt en zal de opening na een tijdje sluiten.

- Het is niet erg als er een kleine opening aan het uiteinde zichtbaar is wanneer de klep niet in gebruik is.

- Dit product is onderhevig aan slijtage. Voor optimale prestaties, als uw duckbill tips niet in gebruik zijn maar een opening hebben die groter is dan 0,5 mm, dient u een nieuwe te vervangen.



Klantenservice

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🌐 <http://maymom.com>

Gemaakt in Taiwan

Productinformatie

Model **S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD**

Materiaal Zuivere siliconen

Hittebestendig 120°C (250°F)

Houdbaarheid 5 jaar (Beschermd tegen direct zonlicht)

Fabrikant Datum 19 AUG. 2024



*SPECTRA en het SPECTRA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA en Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom is niet gelieerd aan Ook onderschrijven zij niet de product- en compatibiliteitsclaims.

*Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG, Zwitserland. Maymom is niet gelieerd aan Medela en Medela onderschrijft het product en de compatibiliteitsclaims niet.

*Freemie is een geregistreerd handelsmerk van Dao Health. Maymom is niet gelieerd aan Dao Health en Dao Health onderschrijft het product en de compatibiliteitsclaims ook niet.

*Hygeia is een geregistreerd handelsmerk van Hygeia Inc. Maymom is niet gelieerd aan Hygeia.



Maymom's ontwerpkenmerk


We ontwerpen de punten van de duckbill met verschillende diktes aan de basis en het puntgebied. Dikkere basis is voor duurzaamheid bij installatie en verwijdering. Dunnere punt is voor betere melkstroom en betere zuigkracht tijdens het kolven.

Gebruik

Installatie

(A) Bevestig de klep **symmetrisch** op de flens.

(B) Als u een grote opening ziet, druk dan rond de rand van het ventiel totdat de opening kleiner is dan 0,5 mm.

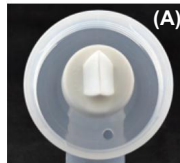

Druk rond de rand van de klep tot de opening kleiner is dan 0,5 mm.

Verwijdering

- (C) Houd de twee platte kanten van de eendensnavel **bij de basis** vast en trek opzij.
- (D) Trek **NIET aan de dunne uiteinden**




Probleemoplossing

Vraag 1. Eendenbek springt/valt af?

Het vet van de moedermelk zorgt ervoor dat de binnenkant van de eendenbek en flens glad worden en loskomen. Zorg ervoor dat u de eendenbekken en flens na elk gebruik wast.

flenzen met heet sop en droog ze. Indien nodig, zal keukenazijn helpen om het vet op te lossen.

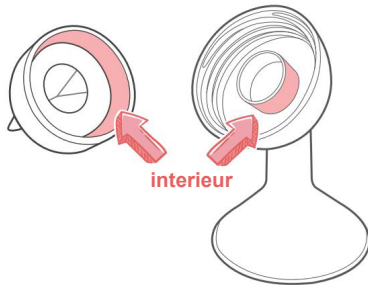

Vraag 2. Lage zuigkracht?


Controleer de punt van de eendenbek op slijtage. Vervang indien nodig.

Controleer of er geen melkresten tussen de binnenste puntjes van de eendensnavels zitten.



Vraag 3. Ruimte tussen de lippen?


Het is niet defect als u een kleine opening ziet tussen de lippen van de klep. Wanneer de pomp zuigkracht genereert, zal de opening sluiten en zullen de kleppen goed functioneren.

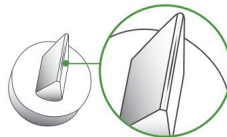

Kleine opening.
Geen zuigkrachtverlies.

Schoon

- GEEN vaatwasserreiniging.
- Vóór het eerste gebruik, 3 minuten in kokend water of 15 minuten in stoom ontsmetten.
- Na elk gebruik, was de kleppen voorzichtig met de hand in heet zeepwater. Spoel schoon gedurende 10-15 sec.
- Na elk gebruik moet u de kleppen zo snel mogelijk loskoppelen, met de hand wassen en drogen om schimmelvorming te voorkomen.

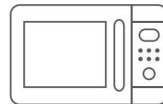

Magnetronbestendig



Zorg ervoor dat er voldoende water in de pan zit.



De rand van de pot zonder water zal oververhit raken en het plastic zal smelten.

Maymom 4e generatie eendenbek



Kenmerken

- ① Stevige basis voor een veilige pasvorm
- ② Dikker oppervlak voor betere grip
- ③ Versterkte punt en bredere opening voor scheurbestendigheid.

Amazon-ASIN:
B07MKDYHVZ



☐ KOPEN(Wit)

Kies 5 tellen

4e generatie kleuren eendenbek



Amazon-ASIN:
B08P4D2Q29



☒ KOPEN(Blauw)

Kies 5 tellen



Amazon-ASIN:
B08P48J289



☒ KOPEN(Roze)

Kies 5 tellen



Amazon-ASIN:
B08P4F314X



☒ KOPEN(Oranje)

Kies 5 tellen

Probleemoplossing

Eendenbek laten vallen?

Het vet van de moedermelk zorgt ervoor dat de binnenkant van de eendenbek en de flens glad worden en loskomen. Zorg ervoor dat u na elk gebruik de eendenbekken en flensen wast met heet zeepwater en **DROOG** ze. Indien nodig, helpt keukenazijn om het vet op te lossen.



Melk in de koelkast?

Controleer of u een gleuf ziet tussen de lipjes van de klep wanneer u op één kant van de lipjes (A) drukt. Als dat niet zo is, draait u de lipjes om de gleuf te openen (B).




(A)



(B)


Eendenbekpop/afleverpunt?

Zorg ervoor dat de twee roze gebieden **GEEN** melkresten bevatten en droog zijn voordat u ze installeert, om te voorkomen dat ze loskomen. (Zie instructies voor details)

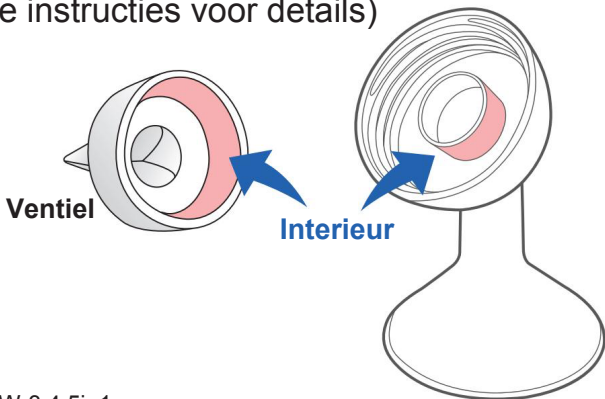


S001W-3.4.5in1

Voorzichtigheid!!!

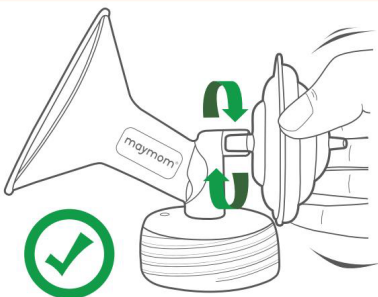

DRAAI

om de terugslagklep in/uit de flens te plaatsen/verwijderen.

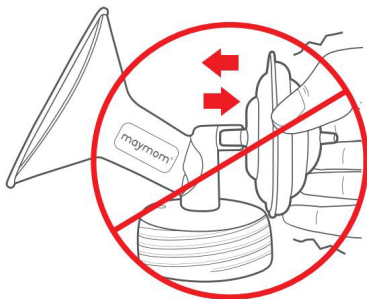

NIET DOEN

rock, duw in/trek met kracht. Er zal een scheur ontstaan.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409