


Valve à bec de canard

Convient aux tétérèlles larges/ standard, Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Open System Retired et aux tétérèlles Maymom

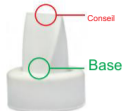

Informations sur le bec de canard

- Après la séance de pompage, les extrémités de la valve à bec de canard peuvent s'ouvrir légèrement. Cependant, l'ouverture se fermera progressivement. Ce n'est pas un défaut car la valve est en matériau élastique. Lors du pompage, les embouts s'ouvrent pour permettre l'écoulement du lait. Lorsque vous arrêtez de pomper, les embouts ne sont pas étirés et l'ouverture se referme après un certain temps.
- Il est normal de voir une petite ouverture à l'extrémité lorsque la valve n'est pas utilisée.
- Ce produit est sujet à l'usure. Pour des performances optimales, si vos embouts en bec de canard ne sont pas utilisés mais présentent un écart supérieur à 0,5 mm, vous devez les remplacer par des neufs.

Service client

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 <http://maymom.com>

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Modèle S005-6D. H005-4fD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD
Matériel Silicone pur
Résistant à la chaleur 120°C (250°F)
Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)
Fabricant Date 19 AOÛT 2024



*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à ils n'approuvent pas non plus les allégations relatives au produit et à la compatibilité.

*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*Freemie est une marque déposée de Dao Health. Maymom n'est pas affiliée à Dao Health et Dao Health n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*Hygeia est une marque déposée de Hygeia Inc. Maymom n'est pas affiliée à Hygeia.



Petite partie étouffée



Élimination du bec de canard



silicone soupape


Fonctionnalité de conception de Maymom

Nous avons conçu les embouts du bec de canard de manière à ce qu'ils aient une épaisseur différente à la base et à la pointe. Une base plus épaisse assure la durabilité lors de l'installation et du retrait. Une pointe plus fine permet un meilleur débit de lait et une meilleure aspiration pendant le pompage.

Utiliser

Installation

- (UN) Fixer **symétriquement** la valve sur la bride.
- (B) Si vous voyez un grand espace ouvert, appuyez autour du bord de la valve jusqu'à ce que l'espace soit inférieur à 0,5 mm.

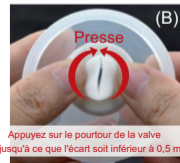

Suppression

- (C) Tenez les deux côtés plats du bec de canard **près de la base** et tirez latéralement.
- (D) **NE PAS tirer sur les pointes fines**




Spectra
large/standard
couMedela
harmonieMedela
Maman de mai
HygiePersonalfit
ConnecteurGratuit
Base de soupape
(Système ouvert retiré)Maymom
grande bouche
Connecteur

Q1. Dépose/dépose de bec de canard ?

La graisse du lait maternel rendra le bec de canard et l'intérieur de la bride glissants et se détacheront. Après chaque utilisation, assurez-vous de laver les becs de canard et

Nettoyez les brides avec de l'eau chaude savonneuse et séchez-les. Si nécessaire, du vinaigre de cuisine aidera à dissoudre la graisse.

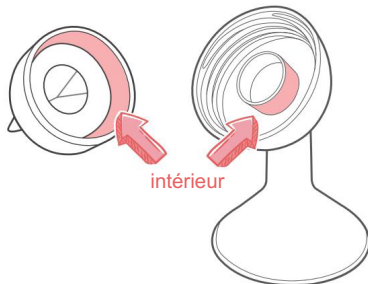

Q2. Faible aspiration ?


Vérifiez que l'extrémité du bec de canard ne présente aucune usure. Remplacez-la si nécessaire.

Vérifiez qu'il n'y a pas de résidus de lait entre les extrémités intérieures des becs de canard.



Q3. Espace entre les lèvres ?


Il n'y a pas de défaut lorsqu'on voit un petit espace entre les lèvres de la valve. Lorsque la pompe génère une aspiration, l'espace se referme et les valves fonctionnent correctement.

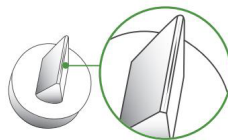

Petit écart.
Aucune perte d'aspiration.

PAS de nettoyage au lave-vaisselle.

- Avant la première utilisation, désinfecter dans de l'eau bouillante pendant 3 min ou dans de la vapeur d'eau pendant 15 min.
- Après chaque utilisation, lavez délicatement les valves à la main dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez pendant 10 à 15 secondes.
- Après chaque utilisation, détachez, lavez à la main et séchez les valves dès que possible pour éviter la formation de moisissures.

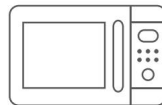

Compatible avec le micro-ondes




Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord de la casserole sans eau surchauffera et cela fera fondre le plastique.


Bec de canard Pop/Drop Off ?

Assurez-vous que les deux zones roses n'ont AUCUN résidu de lait et sont sèches avant l'installation pour éviter qu'elles ne se détachent.
(Voir les instructions pour plus de détails)

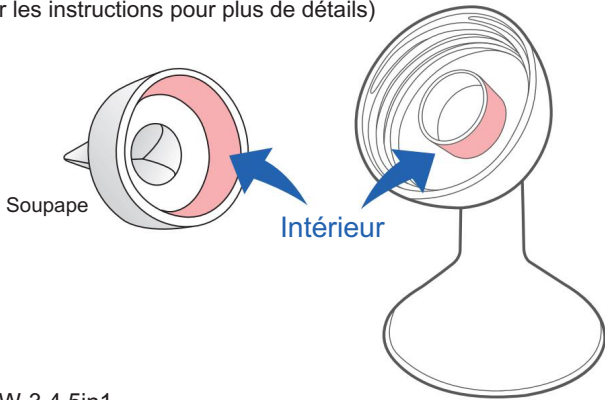


S001W-3.4.5in1

Prudence!!!

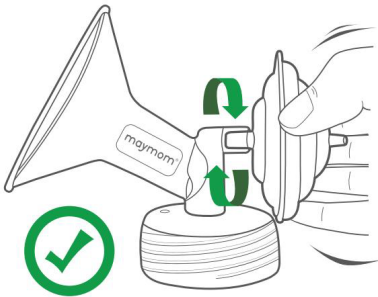

TOURNER

pour insérer/retirer le dispositif anti-retour dans/hors de la bride.

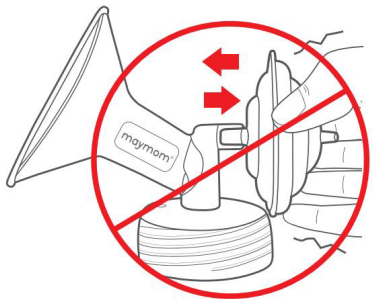

NE PAS

Rocher, pousser/tirer avec force. Une fissure se produira.

Protecteur anti-retour



Assemblage du produit
Vidéo

Pompe compatible



Spectre 9+




Spectres S2



Spectres S1

Raccord à bride

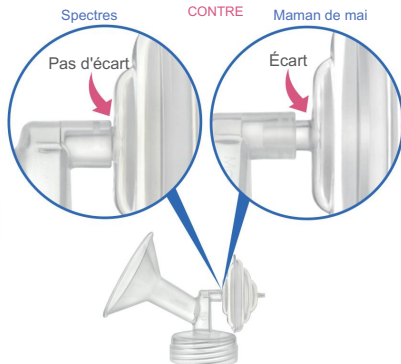

L'écart n'est pas un défaut. Le connecteur à bride Maymom est à double fonction.


Il se connecte à

1. Protecteur anti-retour Spectra
2. Tube de pompe Medela avec style

Installation et retrait




TOURNEZ le protecteur anti-retour pour l'insérer/le retirer dans/hors de la bride

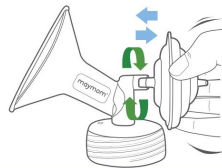

NE PAS tirer/pousser avec force

NE PAS le pousser complètement. Ce n'est pas un défaut de voir un espace entre la bride Maymom et le protecteur.

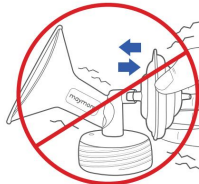

Nettoyage

Avant la première utilisation, et une fois par jour :

- Démontez toutes les pièces, nettoyez à l'eau chaude savonneuse et rincez.
- Faire bouillir les pièces dans de l'eau bouillante pendant 3 minutes.



Assurez-vous d'avoir beaucoup d'eau dans le pot.



Le bord du pot sans eau surchauffera et fera fondre le plastique.

Après chaque utilisation :


- Démontez, nettoyez et rincez les pièces à l'eau tiède. Sécher complètement à l'air libre.

Compatible micro-ondes

Lavable au lave-vaisselle (panier supérieur)


Assemblée

- UN. Placez le diaphragme en silicone dans le boîtier intérieur. Assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement autour du bord
- B. Placez le boîtier extérieur sur le dessus du diaphragme.
- C. Appuyez sur le bord du diaphragme en silicone il est donc au même niveau que les boîtiers extérieur et intérieur.

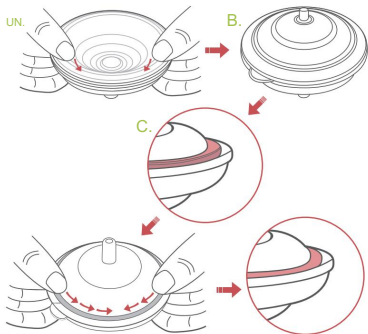

Démontage


- Tenez le boîtier intérieur d'une main.
- Tirez le nœud OPEN sur le boîtier extérieur pour séparer les 2 pièces.

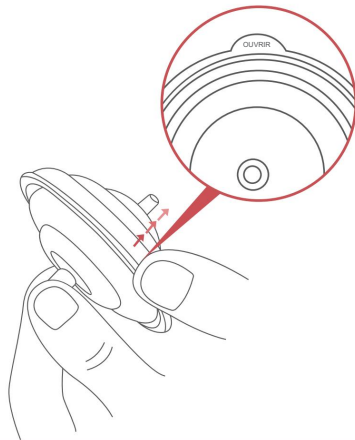


Retrait de la tubulure



Remuez le tube pour le retirer.
(Maintenir une durée de vie plus longue)

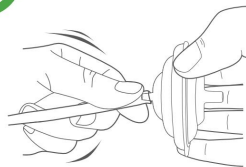

NE PAS tirer pour retirer le tube

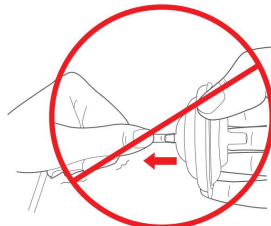

Service client

- ✉ CS@maymom.com
- 🌐 <http://maymom.com/>
- ☎ +1 919 4535168
- 📍 Maymom, LLC

3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703

maymom®
care for each mom!

Fabriqué à Taiwan

Informations sur le produit

Modèle X024-2sBfp

Matériel Polypropylène (PP), Silicone

Résistant à la chaleur 110°C (230°F)

Durée de conservation 5 ans (à l'abri de la lumière directe du soleil)

Fabricant Date 8 mai 2024



*Medela est une marque déposée de Medela Holding AG, Suisse. Maymom n'est pas affiliée à Medela et Medela n'approuve pas le produit ni les allégations de compatibilité.

*SPECTRA et le logo SPECTRA sont des marques déposées de Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA et Min Byung Wook DBA Uzinmedicare. Maymom n'est pas affiliée à eux et n'approuve pas les allégations relatives au produit et à la compatibilité.