


Ördek Gagası Vanası

Geniş /standart meme kalkanı,
Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Açık
Sistem Emekli ve maymom meme kalkanı
için uygundur

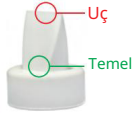

Ördek Gagalı Bilgi

- Pompalama seansından sonra ördek gagası valfinin uçları hafifçe açılabilir. Ancak açıklık kademeli olarak kapanacaktır. Bu bir kusur değildir çünkü valf elastik malzemeden yapılmıştır.
- Pompalama sırasında uçlar süt akışına izin vermek için gerilir. Pompalamayı bıraktığınızda uçlar gerilmez ve açıklık bir süre sonra kapanır.
- Kullanılmadığı zaman valfin ucunda küçük bir açıklık görmek sorun değildir.
- Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, ördek gagası uçlarınız kullanılmıyorsa ancak 0,5 mm'den büyük bir boşluk varsa, yenisiyle değiştirilmelidir.

Müşteri Hizmetleri

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretildi

Ürün Bilgileri

Örnek S005-6D, H005-4FD, X117-4Rr2fD, X029W-2Mba2fD
Malzeme Saf silikon
Isıya dayanıklı 120°C (250°F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 19 AĞ USTOS 2024



*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Freemie, Dao Health'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Dao Health ile bağlantılı değildir ve Dao Health, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Hygeia, Hygeia Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Hygeia ile bağlantılı değildir.




Maymom'un Tasarım Özelliği

Ördek gagasının uçlarını tabanda ve uç alanında farklı kalınlıklarda olacak şekilde tasarlıyoruz. Daha kalın taban, takma ve çıkarma sırasında dayanıklılık içerir. Daha ince uç, pompalama sırasında daha iyi süt akışı ve daha iyi emiş içerir.

Kullanmak

Kurulum

- (A) Vanayı flanşa simetrik olarak takın.
- (B) Eğer büyük bir açık boşluk görürseniz, lütfen boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar valfin kenarına bastırın.

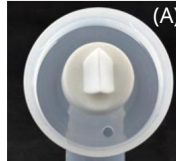

Kaldırma

- (C) Ördek gagasının iki düz kenarını dip kısmına yakın bir yerden tutun ve yana doğru çekin.
- (D) İnce uçları ÇEKMEYİN





speCtra
geniş/standart
boyun



Medela
uyumu



Medela
Maymom
Hygieia'nın



Özgür
Vana tabanı
(Emekli Açık Sistem)



Kişisel uyum
Bağlayıcı




maymom
geniş ağızlı
Bağlayıcı

Ördek gagası patlaması/düşmesi?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagası ve flanş iç kısmını kayganlaştıracak ve yerinden çıkacaktır. Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve

flanşları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve kurutun. Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.

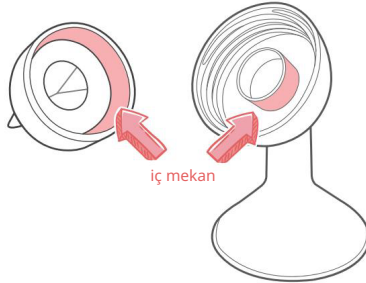


S2. Düşük Emiş Gücü?

Ördek gagasının ucunu herhangi bir aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin. Ördek gagalarının iç uçları arasında süt kalıntısı olmadığından emin olun.



S3. Dudaklar arasında boşluk var mı?


Valfin dudakları arasında küçük bir boşluk gördüğünüzde arızalı değildir. Pompa emme ürettiğinde, boşluk kapanacak ve valfler düzgün çalışacaktır.

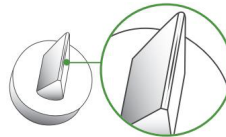

Küçük Boşluk.
Emiş kaybı yok.

Temiz

- Bulaşık makinesi temizliği YOK.
- İlk kullanımdan önce 3 dakika kaynar suda veya 15 dakika su buharında dezenfekte edin.
- Her kullanımdan sonra, vanaları sıcak sabunlu suyla hafifçe yıkayın. 10-15 saniye boyunca durulayarak temizleyin.
- Küf oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra vanaları mümkün olan en kısa sürede çıkarın, elde yıkayın ve kurutun.

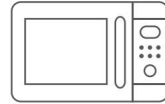

Mikrodalga Güvenli



Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağzı aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.

Maymom, LLC
3 Defne Yaprığı CT Durham, NC 27703
✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da Üretilir

Ürün Bilgileri

Örnek **XP024-2M.w**

Malzeme Saf silikon

Isı ya dayanıklı 120o C (250o F)

Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)

Üretici Tarihi 19 AĞUSTOS 2024



EH **XP024-2M.w**

EAN4713530091146

(X001WGKBFL)İ

X001WGKBFL

Maymom Silikon Memb...veya Spectra Pompa Parçası YENİ



WARNING:
POTENTIAL HAZARD
This is not a toy,
keep it away from children.



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom onlarla bağlantılı değildir ve ürün ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.

maymom®
care for each mom

Silikon Membran

speCtra geri akış koruyucusu için uygundur


- Saf Silikon
- Emiş Gücünü Geri Kazandıran



Üretici Tarihi 3 Temmuz 2024

Kurulum

1. İç Kasayı Silikon Membrana yerleştirin, ardından Geri Akış Koruyucuyu (BP) oluşturmak için tertibatı dış kasa Kasaya yerleştirin.
2. Membran, Geri Akış Koruyucusunun sadece bir parçasıdır. Çalışması için ayrıca dış, iç kasa gibi diğer parçalara da ihtiyacı olacaktır.

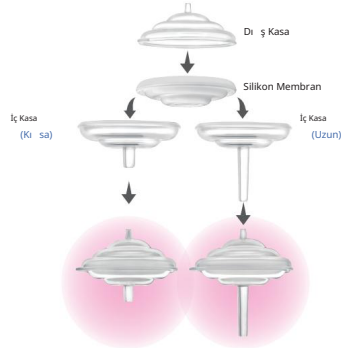

Uyumluluk




- Bu membran Spectra'nın yeni tip geri akış koruyucusuna uygundur.
- Spectra eski tip ile kullanılamaz (yukarıdaki fotoğraflara bakınız).
- Maymom Uzun ve Kısa saplı geri akış koruyucuları na da uygundur.

Temiz

1. İlk kullanımdan önce parçaları 5 dakika kadar suda kaynatın.
2. Her kullanımdan sonra sıcak sabunlu suyla temizleyin, durulayın ve daha sonra açık havada kurutun.
3. Her kullanımdan sonra çıkarın, elde yıkayın ve küf oluşumunu önlemek için membranı mümkün olan en kısa sürede kurutun.


Ördek Gagası Pop/Bırakma?

Kurulumdan önce iki pembe alanda süt kalıntısı olmadığından ve patlamayı önlemek için kuru olduğundan emin (Ayrıntılar için talimatlara bakın)

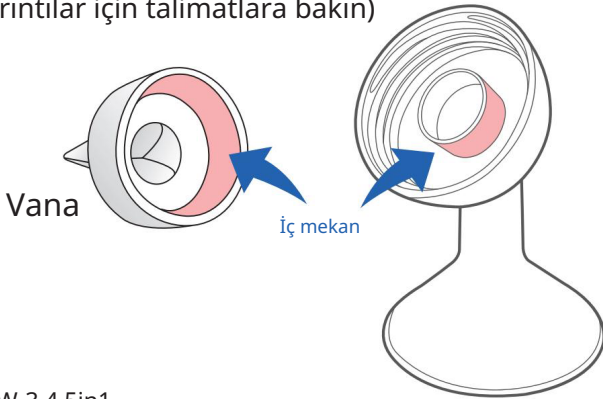


S001W-3.4.5in1

Dikkat!!!

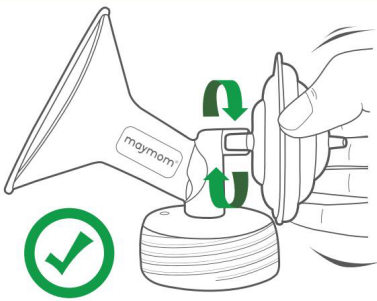

DÖNÜŞ

geri akış koruyucusunu flanşa takmak/
çıkarmak için.

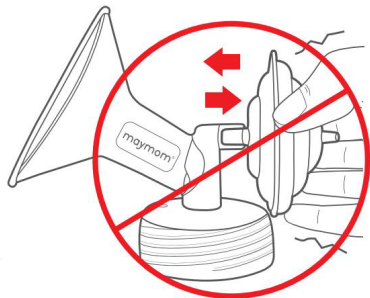

YAPAMAZ

kaya, kuvvetle içeri itin/dışarı
çekin. Çatlak oluşacaktır.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409