


MyFit Flanş Takımı

Krater Serisi


Kase Şeklindeki Göğüsler İçin Daha Uygun

Her annenin göğüs şekli aynı değildir. Maymom Krater Serisi Kalkanlar, özellikle dolgun olduklarında, kase şeklindeki göğüslere daha iyi uyum sağlamak için yaratılmıştır. Daha iyi uyum, areola ile kalkan arasında daha az boşluk olması anlamına gelir ve böylece daha rahat ve etkili pompalama sağlar.

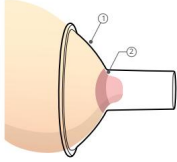

MyFit Krateri

- ① Basınç noktası ve ağrı olmadan rahat uyum
- ② Daha iyi sızdırmazlık ve daha az boşluk sayesinde verimli pompalama uzay

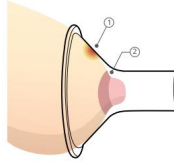

Diğer Kalkan

- ① Göğüste baskı ve sıkışmaya bağlı ağrılar
- ② Daha fazla boşluk nedeniyle verimsizlik

Uyumluluk



Uyumlu Pompalı Sütüyen

Ayrılabilir bir kalkan olan bu ürün, piyasadaki hemen hemen tüm pompalı sütüyenlerle uyumludur.



Basit Dilekler



medela



CESURLUK



Pompa&Hemşire



Pacasso



Pompa Kayışı

Uyumlu Pompa



Sinerji Altın



Sinerji Altın



S1



S2



9+

Medela



Kişisel uyum



Esneklik



Sonsta



Uyum



Salıncak Maxi

Diğerleri



Lansinoh



Lansinoh
Manuel



Maymom
Standart



Maymom
Geniş ağız



Maymom
Standart

Sertifikalar

- ABD FDA'ya sınıf II tıbbi cihaz, göğüs pompası kiti olarak kayıtlıdır. Kayıt No. D192499.
- Gıda ile temas eden kaplar için FDA gerekliliklerine uyum (21 CFR 177.1520, 21 CFR177.2600)
- BPA içermez (EN 14350-2:2004 Madde 4.8.)



Temizlik

Temizlemeden önce kalkanı taban konnektöründen ayırın.

İlk kullanımdan önce ve günde bir kez:

- Tüm parçaları söküp sıcak sabunlu suyla temizleyin ve durulayın.
- Parçaları kaynar suda 3 dakika kadar haşlayın.

Her kullanımdan sonra:

- Parçaları söküp temizleyin ve ılık suda durulayın.
- Tamamen hava ile kurutun.

Bulaşık makinesinde YALNIZCA üst rafta yıkanabilir.



Parçaları söküp
sterilizasyondan önce

Müşteri Hizmetleri

✉ CS@maymom.com
🌐 http://maymom.com/
☎ +1 919 453168
📍 Maymom LLC
3 Defne Yaprağı CT, Durham, NC 27703


Ürün Bilgileri

Örnek MP012C, S012W.BC-F**Dx2
Malzeme Polipropilen
Isıya dayanıklı 110o C (230o F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 1 Ağustos 2024



Ördek Gagası Vanası

Geniş /standart meme kalkanı,
Medela, Hygeia, Spectra, Freemie Açık
Sistem Emekli ve maymom meme kalkanı
için uygundur

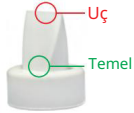

Ördek Gagalı Bilgi

- Pompalama seansından sonra ördek gagası valfinin uçları hafifçe açılabilir. Ancak açıklık kademeli olarak kapanacaktır. Bu bir kusur değildir çünkü valf elastik malzemeden yapılmıştır.
- Pompalama sırasında uçlar süt akışına izin vermek için gerilir. Pompalamayı bıraktığınızda uçlar gerilmez ve açıklık bir süre sonra kapanır.
- Kullanılmadığı zaman valfin ucunda küçük bir açıklık görmek sorun değildir.
- Bu ürün aşınma ve yıpranmaya tabidir. En iyi performans için, ördek gagası uçlarınız kullanılmıyorsa ancak 0,5 mm'den büyük bir boşluk varsa, yenisiyle değiştirilmelidir.

Müşteri Hizmetleri

Maymom LLC
3 Laurel Leaf CT, Durham, NC 27703

✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretildi

Ürün Bilgileri

Örnek S005-6D. H005-4FD. X117-4Rr2fD. X029W-2Mba2fD
Malzeme Saf silikon
Isıya dayanıklı 120°C (250°F)
Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)
Üretici Tarihi 19 AĞ USTOS 2024



*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Medela, Medela Holding AG, İsviçre'nin tescilli ticari markasıdır. Maymom, Medela ile bağlantılı değildir ve Medela, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Freemie, Dao Health'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Dao Health ile bağlantılı değildir ve Dao Health, ürünün uyumluluk iddialarını onaylayamaz.

*Hygeia, Hygeia Inc.'in tescilli ticari markasıdır. Maymom, Hygeia ile bağlantılı değildir.



Küçük parça boğulma



Ördek Gagası Kaldırma



silikon vana


Maymom'un Tasarım Özelliği

Ördek gagasının uçlarını tabanda ve uç alanında farklı kalınlıklarda olacak şekilde tasarlıyoruz. Daha kalın taban, takma ve çıkarma sırasında dayanıklılık içerir. Daha ince uç, pompalama sırasında daha iyi süt akışı ve daha iyi emiş içerir.

Kullanmak

Kurulum

- (A) Vanayı flanşa simetrik olarak takın.
- (B) Eğer büyük bir açık boşluk görürseniz, lütfen boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar valfin kenarına bastırın.

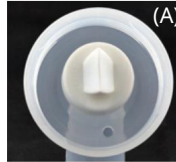

Vananın kenarına bastırın
boşluk 0,5 mm'den küçük olana kadar.

Kaldırma

- (C) Ördek gagasının iki düz kenarını dip kısmına yakın bir yerden tutun ve yana doğru çekin.
- (D) İnce uçları ÇEKMEYİN





speCtra
geniş/standart
boyun



Medela
uyumu



Medela
Maymom
Hygieia'nın



Özgür
Vana tabanı
(Emekli Açık Sistem)



Kişisel uyum
Bağlayıcı




maymom
geniş ağızlı
Bağlayıcı

Ördek gagası patlaması/düşmesi?

Anne sütünden gelen yağ, ördek gagası ve flanş iç kısmını kayganlaştıracak ve yerinden çıkacaktır. Her kullanımdan sonra ördek gagalarını ve

flanşları sıcak sabunlu suyla yıkayın ve kurutun. Gerekirse mutfak sirkesi yağın çözülmesine yardımcı olacaktır.

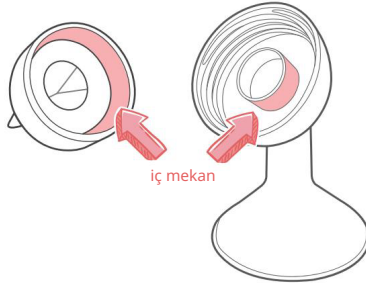


S2. Düşük Emiş Gücü?

Ördek gagasının ucunu herhangi bir aşınma ve yıpranma açısından kontrol edin. Gerektiğinde değiştirin. Ördek gagalarının iç uçları arasında süt kalıntısı olmadığından emin olun.



S3. Dudaklar arasında boşluk var mı?


Valfin dudakları arasında küçük bir boşluk gördüğünüzde arızalı değildir. Pompa emme ürettiğinde, boşluk kapanacak ve valfler düzgün çalışacaktır.

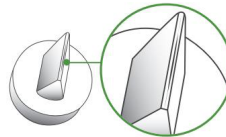

Küçük Boşluk.
Emiş kaybı yok.

Temiz

- Bulaşık makinesi temizliği YOK.
- İlk kullanımdan önce 3 dakika kaynar suda veya 15 dakika su buharında dezenfekte edin.
- Her kullanımdan sonra, vanaları sıcak sabunlu suyla hafifçe yıkayın. 10-15 saniye boyunca durulayarak temizleyin.
- Küf oluşumunu önlemek için her kullanımdan sonra vanaları mümkün olan en kısa sürede çıkarın, elde yıkayın ve kurutun.

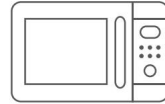

Mikrodalga Güvenli




Tencerede bol su olduğundan emin olun.



Su olmayan tencerenin ağız aşırı ısınır ve plastiği eritecektir.


Ördek Gagası Pop/Bırakma?

Kurulumdan önce iki pembe alanda süt kalıntısı olmadığından ve patlamayı önlemek için kuru olduğundan emin (Ayrıntılar için talimatlara bakın)

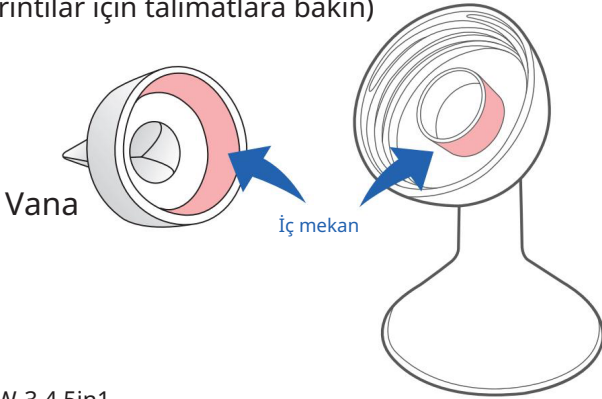


S001W-3.4.5in1

Dikkat!!!

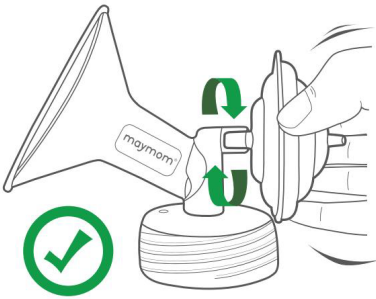

DÖNÜŞ

geri akış koruyucusunu flanşa takmak/
çıkarmak için.

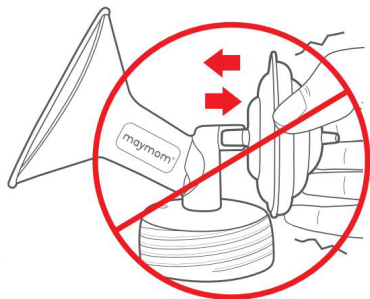

YAPAMAZ

kaya, kuvvetle içeri itin/dışarı
çekin. Çatlak oluşacaktır.