

Adapters voor moedermelkbewaarzakken



ÿPast op de meeste borstschilden met brede hals
(Avent, Spectra S1/S2 brede mondflienzen)
ÿCompatibel met populaire tassen zoals Lansinoh, Nuk
ÿPomp direct in bewaarzakken ÿGeen
melkverlies door overhevelen van opvangflessen naar
zakken



Materiaal: Polypropyleen (PP),
roestvrij staal
Hittebestendig: 110o C (230o F)
Houdbaarheid: 15 jaar
Model: X029W-28ba
Fabrikationsdatum: 19 juni 2024



Gebruiksaanwijzing

Schoonmaak (Doe de adapter NOOIT in de magnetron!!)

Vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag: Was de adapter met warm water en een mild reinigingsmiddel en spoel hem daarna schoon.

Steriliseer het product gedurende 2 minuten in kokend water.

Na elk gebruik: afwassen met warm water en een mild schoonmaakmiddel en daarna schoonspoelen.


Gebruik (Let op: deze adapter is niet geschikt voor alle moedermelkbewaarzakken op de markt.)



NOOIT in de
magnetron doen!!

Stap 1.

Open de ritsluiting
van de zak.

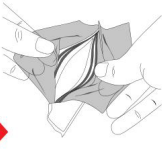

Stap 2.


Vouw de overhangende
delen naar buiten.



Stap 3.

Voor de tassen met
bovenstaand ontwerp

Draai de zak open met
uw vingers.
Open de klemmen en
plaats de trechter van de
adapter in het zakje.

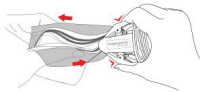


(Raak de binnenkant van de
tas niet aan met uw vingers
vanwege hygiënische redenen)

Stap 4.

De klem moet onder de
ritslijn zitten.



De klem moet
onder de ritslijn
zitten.

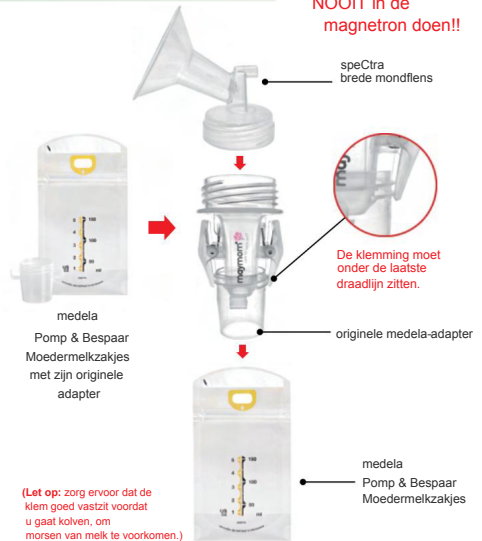

Verenigbaarheid

ÿDe lengte van de ritslijn moet langer zijn dan 7,5 cm en de locatie van de lijn mag niet verder weg zijn
dan 2 cm van de bovenrand van de tas.

ÿDe klemlocatie moet onder de rits zitten om te voorkomen dat de tas wegglijdt.



Bekende
compatibele
tassen



Lansinoh



NIET



Medela
pompen & besparen
(tas met originele adapter)



Bekende
niet-compatibele
tassen



Medela
moedermelk tas



Medela
moedermelk tas



AVENT
moedermelk tas

*Avent is een geregistreerd handelsmerk van Koninklijke Philips NV.
Maymom is niet gelieerd aan Philips en Philips onderschrijft
het product ook niet.

*SPECTRA en het SPECTRA-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Mother's Milk, Inc. CIBA Spectra Baby USA en Min
Byung Wook CIBA Utzmedicare. Maymom is niet aan hen
gelieerd en onderschrijft het product ook niet.

*Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding
AG, Zolterland. Maymom is niet gelieerd aan Medela en Medela
onderschrijft het product ook niet.

*Lansinoh is een geregistreerd handelsmerk van Lansinoh Laboratories,
Inc. Maymom is niet gelieerd aan Lansinoh en Lansinoh
onderschrijft het product ook niet.

*NUK is een geregistreerd handelsmerk van NUK GmbH, Duitsland.
Maymom is niet gelieerd aan NUK en NUK onderschrijft het product
niet.

Maymom klantenservice

CS@maymom.com

http://maymom.com/

+1 919 4535168

Maymom, LLC 3 Laurel Leaf CT Durham, NC 27703



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



Instructie
video



2 kg klemming -
geen probleem

Gemaakt in Taiwan



NOOIT in de magnetron doen!!

Veer van roestvrij staal aan de binnenkant.

Reinig of steriliseer deze melkzakadapter

NIET in een magnetron of stoomzak.

Het roestvrijstalen onderdeel zorgt ervoor dat het product bij hoge temperatuur smelt.



NOOIT in de magnetron doen!!



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409