

Maymom, LLC
3 Defne Yaprığı CT Durham, NC 27703
✉ CS@maymom.com
☎ +1 919 4535168
🏠 http://maymom.com

Tayvan'da üretilir

Ürün Bilgileri

Örnek **XP024-2M.w**

Malzeme Saf silikon

Isı ya dayanıklı 120o C (250o F)

Raf ömrü 5 yıl (Doğrudan güneş ışığından uzak)

Üretici Tarihi 19 AĞUSTOS 2024



EH **XP024-2M.w**

EAN4713530091146

(X001WGKBFL)İ

X001WGKBFL

Maymom Silikon Memb...veya Spectra Pompa Parçası YENİ



**WARNING:
POTENTIAL HAZARD**
This is not a toy,
keep it away from children.



**WARNING:
CHOKING HAZARD**
Small parts.
Not for children under 3yrs.

*SPECTRA ve SPECTRA Logosu, Mother's Milk, Inc. DBA Spectra Baby USA ve Min Byung Wook DBA Uzinmedicare'in tescilli ticari markalarıdır. Maymom onlarla bağlantılı değildir ve ürün ve uyumluluk iddialarını onaylamaz.

maymom®
care for each mom

Silikon Membran

speCtra geri akış koruyucusu için uygundur


- Saf Silikon
- Emiş Gücünü Geri Kazandıran



Üretici Tarihi 3 Temmuz 2024

Kurulum

1. İç Kasayı Silikon Membrana yerleştirin, ardından Geri Akış Koruyucuyu (BP) oluşturmak için tertibatı dış kasa Kasaya yerleştirin.
2. Membran, Geri Akış Koruyucusunun sadece bir parçasıdır. Çalışması için ayrıca dış kasa gibi diğer parçalara da ihtiyacı olacaktır.

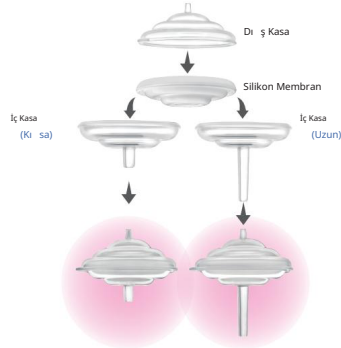

Uyumluluk



- Bu membran Spectra'nın yeni tip geri akış koruyucusuna uygundur.
- Spectra eski tip ile kullanılamaz (yukarıdaki fotoğraflara bakınız).
- Maymom Uzun ve Kısa saplı geri akış koruyucuları na da uygundur.

Temiz

1. İlk kullanımdan önce parçaları 5 dakika kadar suda kaynatın.
2. Her kullanımdan sonra sıcak sabunlu suyla temizleyin, durulayın ve daha sonra açık havada kurutun.
3. Her kullanımdan sonra çıkarın, elde yıkayın ve küf oluşumunu önlemek için membranı mümkün olan en kısa sürede kurutun.

speCtra S1/S2/9 ve için uygundur
Philips AVENT Comfort Göğüs Pompaları

Talimatlar

İlk kullanımdan önce:

Vanayı kaynar su veya buharda 3-5 dakika temizleyin.



Her kullanımdan sonra:

Sıcak su ile temizleyin ve ardından hava ile kurutun.
Gerektiğinde kaynar su veya buharda sterilize edin.

Kurulum: Aşağıdaki fotoğraflara bakın



speCtra



Philips Avent

Kaldırma:

Vanayı flanştan çekerken ASLA ortasındaki açıklıktan tutmayın.

Yan sapından çekerek çıkarın. Bu şekilde valfin hassas bölgesine zarar vermezsiniz.

Temizlik:

Temizlemek için valf açıklığına asla herhangi bir nesne sokmayın.
Bu, parçanın yırtılmasına veya gerilmesine ve bunun sonucunda da performansın düşmesine neden olabilir.



Sorun Giderme

Emiş olmadığına, valf ucunun hasarlı veya yırtık olmadığını ve herhangi bir kalıntı veya yabancı madde olmadığını doğrulamak için Vananın iki dudağı arasındaki parçacıkları.

Küçük bir saç bile emiş gücünde kayba yol açacaktır. Ancak kullanılmadığında uçta küçük bir açıklık (<0,4 mm) görmek sorun değildir.

Bu ürün gıda ile temas eden plastikler için FDA Standartlarına uygundur.
Raporlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Malzeme: Silikon (-15o F - 250o F)
Modeli: P005.2G

Raf Ömrü: 10 yıl

Üretici Tarihi: 12 Eylül 2024

Tayvan'da üretilmiştir



Müşteri Hizmetleri

Maymom, LLC 3
Laurel Leaf CT Durham, NC 27703 +1 919

 4535168

 CS@maymom.com

 <http://maymom.com/>



WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts.
Not for children under 3yrs.



WARNING:
POTENTIAL HAZARD

This is not a toy,
keep it away from children.



silikon

*Avent, Philips NL'nin tescilli ticari markasıdır.
Maymom, Philips ile bağlantılı değildir ve Philips de ürünü desteklemez.



FR



EC REP SERVICES SL

Calle Gran Via 49, 7 DCH. Madrid 28013 Spain

ecrepservice@hotmail.com

EN	WARNING : To avoid danger of suffocation, keep this plastic bag away from babies and children. WARNING : Small parts. Not a toy. Keep it away from babies and children. Choking hazard.
FR	AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez ce sac en plastique hors de portée des bébés et des enfants. AVERTISSEMENT : Petites pièces. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des bébés et des enfants. Risque d'étouffement.
DE	WARNUNG : Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie diese Plastiktüte von Babys und Kindern fern. WARNUNG : Kleinteile. Kein Spielzeug. Halten Sie es von Babys und Kindern fern. Erstickungsgefahr.
IT	ATTENZIONE : Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere questo sacchetto di plastica lontano dalla portata di neonati e bambini. ATTENZIONE : piccole parti. Non è un giocattolo. Tienilo lontano dalla portata di neonati e bambini. Pericolo di soffocamento.
ES	ADVERTENCIA : Para evitar peligro de asfixia, mantenga esta bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños. ADVERTENCIA : Piezas pequeñas. No es un juguete. Manténgalo alejado de bebés y niños. Peligro de asfixia.
PL	OSTRZEŻENIE : Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy trzymać tę plastikową torbę z dala od niemowląt i dzieci. OSTRZEŻENIE : Małe części. To nie zabawka. Trzymaj z dala od niemowląt i dzieci. Ryzyko zadławienia.
NL	WAARSCHUWING : Houd deze plastic zak uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen. WAARSCHUWING : Kleine onderdelen. Geen speelgoed. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen. Verstikkingsgevaar.
SE	WARNING : För att undvika risk för kvävning, förvara denna plastpåse borta från spädbarn och barn. WARNING : Små delar. Inte en leksak. Håll den borta från spädbarn och barn. Kvävningsrisk.
TR	UYARI : Boğulma tehlikesini önlemek için bu plastik torbayı bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. UYARI : Küçük parçalar. Oyuncak değildir. Bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma tehlikesi.
中文	警告：為避免發生窒息危險，請將此塑膠袋置於嬰兒和兒童無法觸及之處。 警告：小零件，不是玩具，請將其遠離嬰兒和兒童，避免誤食產生窒息危險。
JP	警告：窒息の危険を避けるため、このビニール袋を乳幼児の手の届かないところに保管してください。 警告：小さな部品です。おもちゃではありません。乳幼児の手の届かないところに保管してください。 窒息の危険があります。



Scan for Instruction
 Rechercher des instructions
 Nach Anleitung scannen
 Scansione per istruzioni
 Escanear para obtener instrucciones
 Skanuj w celu uzyskania instrukcji
 Scannen voor instructies
 Skanna efter instruktioner
 Talimat için tarama
 掃一掃取得使用說明
 指示をスキャンする

EU Importer
 Jia Shou Enterprise Co. Ltd

No.22, Aly, 19, Ln. 403, Dawu Rd., Pingtung City,
 Pingtung County 900 Taiwan

jeande201@gmail.com

Made in Taiwan

Lot 202409